


Atelier Contention du moignon et chaussage

Chaussage d'une prothèse tibiale avec manchon
à accrochage distal



- Le chaussage... Pourquoi?

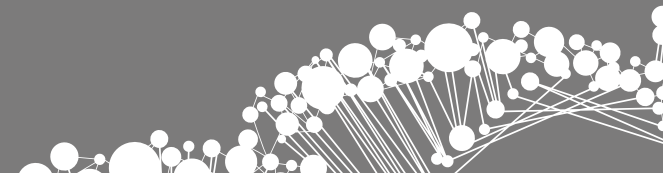

- Risque de lésion cutanée
- Risque de chute
- Risque de blessure



- Positionner correctement son fauteuil

- Se placer à côté d'un endroit où l'on peut avoir un appui (pied de lit / barre d'appui)

- Mettre les freins
- Relever les cale-pieds



- **Rendre le moignon accessible**

- Relever le pantalon suffisamment haut ou, sinon, retirer le
- Avancer les fesses au bord de l'assise



- Retourner le manchon

- Le côté tissu du manchon doit se retrouver à l'intérieur

- Le retourner au maximum afin d'éviter qu'il y ait un creux au bout



- Appliquer le manchon sur le moignon

- Placer le manchon retourné sur le bout du moignon



- Dérouler le manchon

- Une fois déroulé

- L'écriture doit être devant
- Le trou réservé au plongeur doit être dans l'axe de la jambe



- Positionner le « plongeur » sur le manchon

- Visser le plongeur à l'extrémité du manchon

- Veiller à ce que le plongeur soit dans l'axe de la jambe



- Introduire le moignon dans l'emboiture

- Introduire le moignon dans l'emboiture, le plus loin possible

- Veiller à ce que le plongeur soit dans l'axe du trou de la prothèse prévu pour l'accueillir



- Introduire le moignon dans l'emboiture

- Poser les 2 mains sur le genou demi fléchi
- Et appuyer vers le bas pour enfoncer plus profondément le moignon dans l'emboiture



- Enclencher le plongeur dans l'emboiture

- Se mettre vous debout avec l'aide des accoudoirs
- Prendre un appui stable des 2 mains
- Lever le pied non appareillé plusieurs fois



- Vérifier que la prothèse est bien accrochée

- Pour retirer la prothèse...

- Comment faire ?



-
- S'asseoir sur un siège stable
-

- Vérifier que les freins du fauteuil roulant sont bien mis ou que la chaise est bien stable



- Retirer la prothèse

- D'une main tenir la prothèse, de l'autre appuyer sur le bouton qui déverrouille le plongeur du manchon
- Tout en maintenant l'appui, on peut retirer le moignon de l'emboiture



- Retirer le plongeur du manchon

- Dévisser le plongeur pour ne pas se blesser avec
- Fixer le plongeur dans l'emboîture pour ne pas le perdre



- En cas de problème ...

- Que faire ?



- En cas de problème ...

Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la prothèse

1. Vérifiez la mise du manchon

- Vérifiez que votre manchon est bien positionné, le dessin sur le dessus du moignon au milieu de celui-ci
- Vérifiez que le plongeur est positionné dans l'axe du moignon.
- Si ce n'est pas le cas, ôtez le manchon et repositionnez-le



- En cas de problème ...

Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la prothèse

2. Vérifiez les volumes

- Si votre moignon rentre difficilement dans l'emboîture, retirez un bonnet.
- Si vous n'en aviez pas, gardez le manchon sur votre moignon en position allongée et attendez quelques temps que le volume diminue. Réessayez de mettre la prothèse.



- En cas de problème ...

Si vous êtes bloqué dans la prothèse

- Contactez au plus vite votre orthoprothésiste pour un rendez vous urgent
- Si l'orthoprothésiste est non joignable, passez de l'eau froide savonneuse entre la peau et le manchon pour faire glisser la prothèse
- Ne jamais rester avec la prothèse chaussée toute la nuit



-
- En cas de problème...
-

Si vous n'avez pas de solutions...

- En cas de persistance de difficulté, contactez votre orthoprothésiste et votre médecin de rééducation

