


Atelier Contention du moignon et chaussage

Chaussage d'une prothèse tibiale à
dépressurisation avec gaine de succion



- Le chaussage... Pourquoi ?

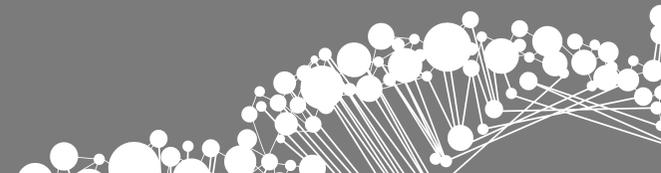

- Risque de lésion cutanée
- Risque de chute
- Risque de blessure



- Positionner correctement son fauteuil

- Se placer à côté d'un endroit où l'on peut avoir un appui (pied de lit / barre d'appui)

- Mettre les freins
- Relever les cale-pieds



- Rendre le moignon et la cuisse accessibles

- Relever le pantalon suffisamment haut ou, sinon, le retirer




- Retourner le manchon

- Le côté gel du manchon doit se retrouver à l'extérieur



- Le retourner au maximum afin d'éviter qu'il y ait un creux au bout

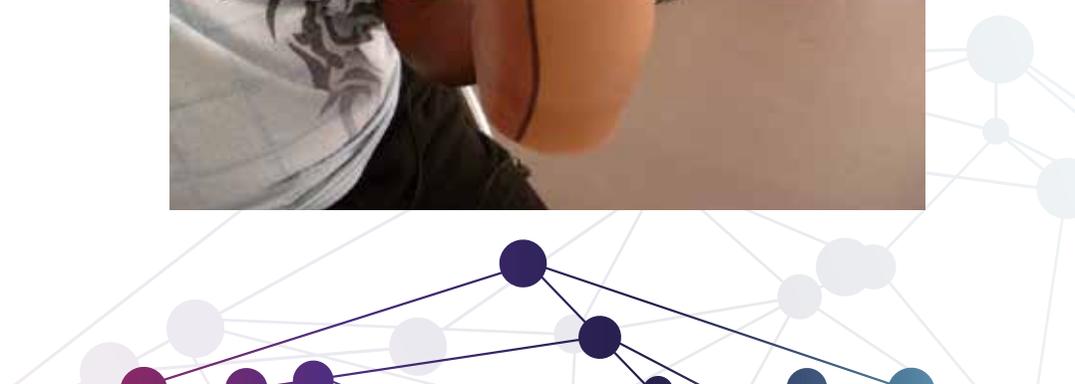

- Appliquer le manchon sur le moignon

- Placer le manchon retourné sur le bout du moignon
- Dérouler le manchon jusqu'au bout



- L'écriture doit être devant

- Préparer la prothèse au chaussage


- Retourner la gaine de succion sur l'emboiture, côté gel à l'extérieur

- Veiller à dérouler la gaine suffisamment afin que l'arrière de l'emboiture soit découverte



- Introduire le moignon dans l'emboiture

- Avancer les fesses au bord de l'assise
- Tenir la prothèse à 2 mains
- Et introduire le moignon dans l'emboiture, le plus loin possible

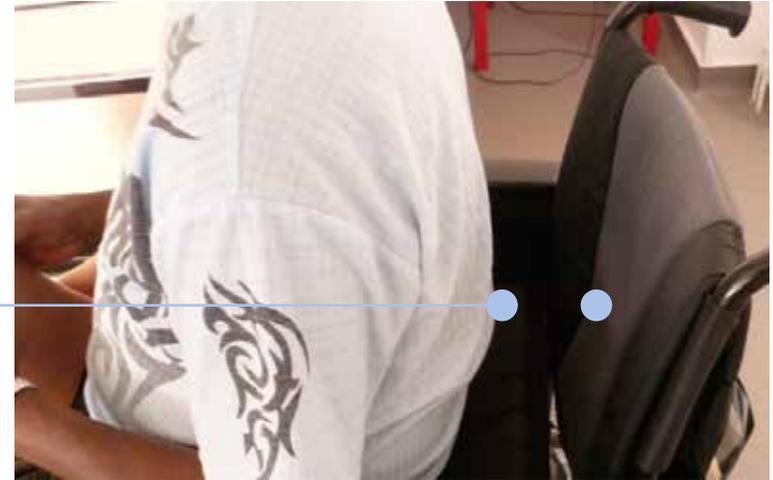

- Introduire le moignon dans l'emboiture

- Poser le pied au sol, genou demi fléchi
- Poser ensuite les 2 mains sur le genou et appuyer vers le bas pour enfoncer plus profondément le moignon dans l'emboiture



- Accrocher la prothèse au moignon

- Dérouler la gaine de succion sur l'emboiture puis la cuisse
- Une fois déroulée au maximum, la gaine doit dépasser d'une largeur de paume la partie haute du manchon

- Il est très important de dérouler la gaine sans tirer



- S'assurer du bon chaussage de la prothèse

- Se mettre debout avec l'aide des accoudoirs et piétiner sur place pour chasser l'air de l'emboîture



- Pour retirer la prothèse...


- Comment faire ?



- Pour retirer la prothèse...

- S'asseoir sur un siège stable

- Ne pas oublier de vérifier que les freins du fauteuil roulant sont mis ou que la chaise est stable

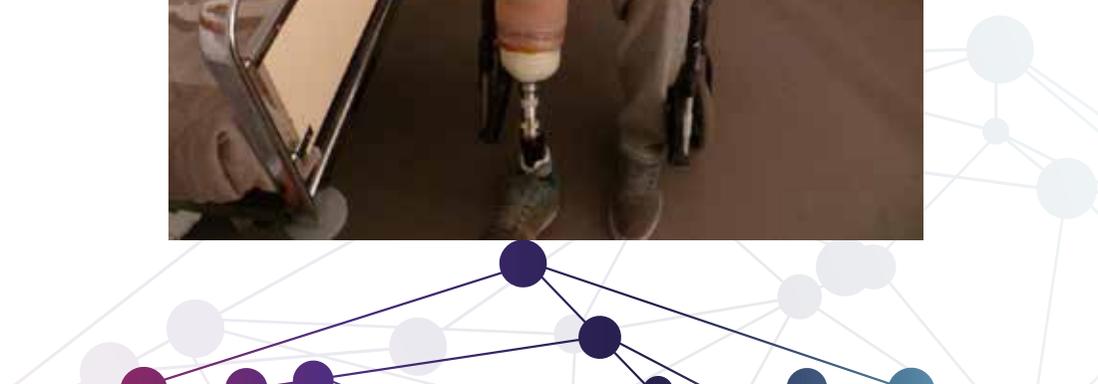

- Pour retirer la prothèse...

- Dérouler la gaine de succion, sans tirer, afin de dégager l'emboiture
- Retirer le moignon de l'emboiture



- Pour retirer la prothèse...

- Important pour ne pas abimer la gaine de succion

- Ne pas laisser la gaine déroulée sur l'emboiture
- Il faut la retourner à l'intérieur de l'emboiture



- En cas de problème ...

- Que faire ?



- En cas de problème ...

Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la prothèse

1. Vérifiez la mise du manchon et la gaine de succion

- Vérifiez que votre manchon est bien positionné écriture devant.
- Vérifiez que la gaine de succion est bien déroulée et dépasse le manchon d'une largeur de paume.



- En cas de problème ...

Si vous rencontrez un problème dans le chaussage de la prothèse

2. Vérifiez les volumes

- Si votre moignon rentre difficilement dans l'emboiture, retirez un bonnet.
- Si vous n'en aviez pas, gardez le manchon sur votre moignon en position allongée et attendez quelques temps que le volume diminue. Réessayez de mettre la prothèse.



- En cas de problème ...

Si vous n'avez pas de solutions...

- En cas de persistance de difficulté
- Si vous constatez une usure de la gaine de succion, du manchon ou de la prothèse
- Contactez votre orthoprothésiste et votre médecin de rééducation

